


卵通信三二（技術編Vol.2）

凍結体外受精卵の融解方法を再確認しましょう！

マニュアル通りの融解方法が、受胎率向上の鍵です！

当団が提供する凍結体外受精卵の融解は、
以下の方法で行ってください。

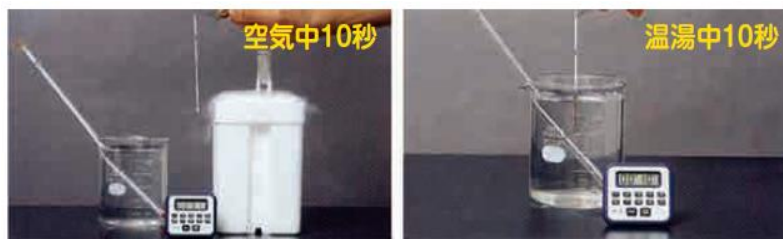

綿栓部分を持ってください

- ◆必ず**温度計**と**タイマー**を準備。
- ◆**空気中で10秒**
温湯中で10秒。
- ◆**温湯**は
30～35℃を厳守。

注意事項

- ①凍結受精卵の融解方法は供給元により異なります。当団の体外受精卵は上記のとおり融解してください。
- ②当団の体外受精卵の生存性は外気温には左右されませんが、風がある状況下（風が吹く屋外、車中でエアコンの風が当たる場所など）では、ストロー内の温度が急上昇し、受精卵の生存性を脅かしますので、無風下で融解してください。

<http://liaj.or.jp/ivf/>

詳細情報は、家畜バイテクセンターのホームページをご覧ください。

